

Ghid rapid pentru conectivitatea dispozitivelor Apple®

Procesor de sunet Cochlear™ Nucleus® 7



Notă: Aceste instrucțiuni sunt pentru iOS10. Versiunile ulterioare de iOS pot avea ecrane ușor diferite.

Beneficiile conectivității Made for iPhone

- Transmiteți muzică sau alte fișiere audio direct la procesorul dvs. de sunet
- Transmiteți apeluri telefonice sau FaceTime® direct la procesorul dvs. de sunet
- Controlați și reglați setările de pe procesorul dvs. de sunet
- Utilizați aplicația Nucleus Smart (concepută pentru dispozitive iPhone și iPod touch).



Hardware acceptat

Procesoarele de sunet Cochlear Nucleus 7 acceptă conectivitate directă la următoarele dispozitive Apple (sau o versiune ulterioară):

- iPhone 5
- iPad din a 4-a generație; iPad Air și iPad Air 2; iPad mini 2, 3 și 4; iPad Pro
- iPod touch din a 6-a generație

care utilizează iOS 10 sau o versiune superioară.



Punerea în pereche a procesorului de sunet cu dispozitivul dvs. Apple

Înainte de a putea utiliza funcțiile de transmisie audio sau funcțiile de control de bază, trebuie să puneți în pereche procesorul(ele) de sunet cu dispozitivul dvs. Apple.

Pentru instrucțiuni, consultați *Ghidul privind punerea în pereche a procesorului de sunet Nucleus 7*.

Utilizare bimodală cu un aparat auditiv compatibil*

Dacă utilizați un procesor de sunet pe o parte și un aparat auditiv compatibil* pe cealaltă parte, le puteți pune pe ambele în pereche cu dispozitivul dvs. Apple. Acest lucru vă permite să utilizați funcțiile dispozitivului de transmisie audio și de control de bază atât cu procesorul de sunet, cât și cu aparatul auditiv.

Important: mai întâi, medicul dvs. trebuie să pună în legătură procesorul de sunet și aparatul auditiv utilizând software-ul de programare al procesorului de sunet.

Notă: atunci când puneți în pereche cu dispozitivul dvs. Apple, asigurați-vă că puneți în pereche procesorul de sunet și aparatul auditiv în aceeași fereastră de punere în pereche.

Punerea în pereche cu mai mult de un iPhone, iPad sau iPod touch

Puteți pune în pereche până la cinci dispozitive diferite cu procesorul(ele) dvs. de sunet, însă puteți fi conectat în mod activ numai la un dispozitiv o dată.

Pentru a schimba **manual** conexiunea între dispozitive, opriți Bluetooth® pe dispozitivul conectat și porniți Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați. Procesorul dvs. de sunet se va conecta apoi automat la al doilea dispozitiv.

* Consultați www.cochlear.com/nucleus/compatibility pentru detalii.

Ghid rapid pentru conectivitatea dispozitivelor Apple®

Procesor de sunet Cochlear™ Nucleus® 7



Transmisia de muzică sau fișiere video



Puteți transmite muzică sau alte fișiere audio direct la procesorul(ele) de sunet conectat(e).

Atunci când procesorul de sunet se conectează, acesta ar trebui să devină destinația de transmisie audio implicită.

Apăsați pur și simplu pe „redare”, iar fișierul audio va începe să fie transmis la procesorul dvs. de sunet.

Dacă este necesar, glisați în sus panoul de control de la baza ecranului, apoi glisați spre stânga pentru a accesa cartela audio. În meniul derulant de la baza ecranului, selectați procesorul dvs. de sunet.

Controlați volumul utilizând cursorul de pe panoul de control sau prin intermediul butoanelor de volum hard de pe dispozitivul dvs. Apple.

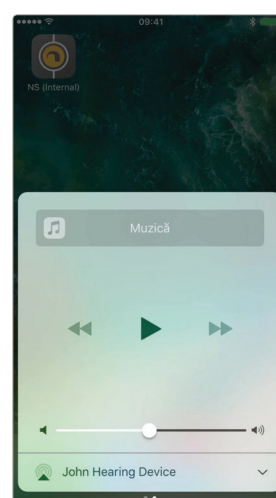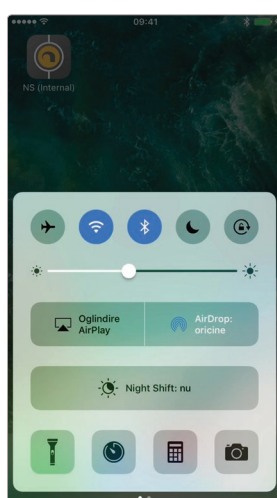



Transmisia de apeluri telefonice sau FaceTime

Puteți transmite apeluri telefonice sau FaceTime direct la procesorul(ele) de sunet conectat(e).

Atunci când procesorul de sunet se conectează, acesta ar trebui să devină destinația de transmisie audio implicită.

Atunci când efectuați un apel telefonic, apare automat un meniu care vă permite să selectați unde se va transmite fișierul audio.

Atunci când primiți un apel telefonic (sau în timpul unui apel telefonic), puteți să apăsați pictograma „audio” de pe ecran și să selectați unde se va transmite fișierul audio.

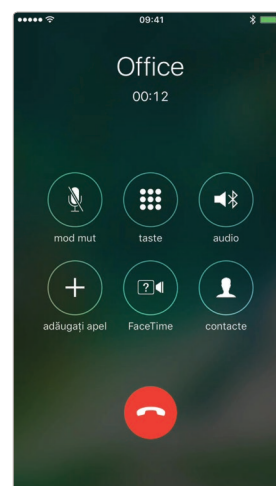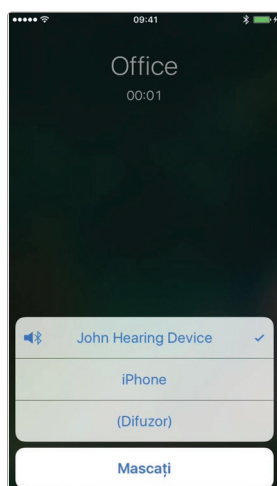

Ghid rapid pentru conectivitatea dispozitivelor Apple®

Procesor de sunet Cochlear™ Nucleus® 7






Schimbarea setărilor implicite pentru transmisia audio

S-ar putea să nu doriți întotdeauna ca fișierele audio să fie transmise la procesorul de sunet. De pildă, dacă ați pus în pereche procesorul de sunet al copilului dvs. cu iPhone-ul dvs. în vederea controlului și monitorizării, însă nu doriți ca acesta să primească apelurile dvs. telefonice.

Pentru a auzi tonurile de apel prin intermediul difuzorului telefonului, accesați **Setări > General > Accesibilitate > Dispozitive auditive** și opriți „Dispozitivele auditive redau soneriile”.

Apoi, atingeți **Dirijare audio > Audio apel** și selectați „**Niciodată prin protezele auditive**”. Repetați pentru **Audio multimedia** pentru a dezactiva transmisia de muzică sau de alte fișiere audio.

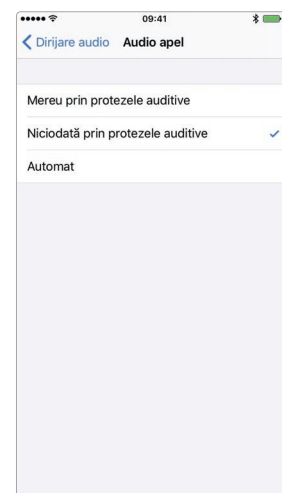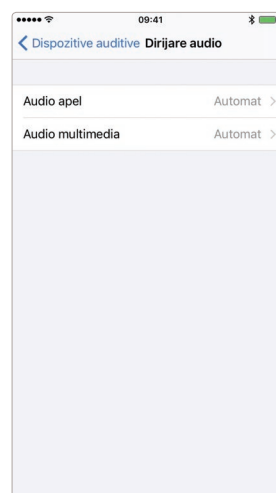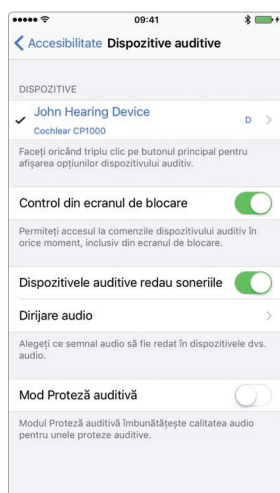

Controlul procesorului de sunet de pe iPhone, iPad sau iPod touch


Puteți controla funcții de bază ale procesorului de sunet de pe dispozitivul dvs. Apple — fie utilizând **comanda rapidă Accesibilitate**, fie utilizând **Setări**.

Controlul prin intermediul comenzii rapide Accesibilitate

Accesați comenzile integrate prin triplu clic pe butonul Acasă.

Odată deschis ecranul **Dispozitive auditive**, puteți să vedeți informații-cheie, să reglați volumul și să selectați programe.


Ascultare live® permite microfonului dispozitivului dvs. Apple să capteze sunet și să îl transmită direct la procesorul de sunet.

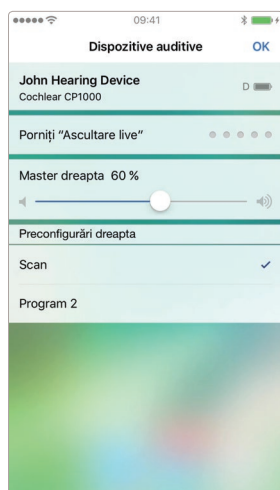

Controlul prin intermediul Setărilor

Accesați procesorul de sunet prin intermediul **Setări > General > Accesibilitate > Dispozitive auditive**. Atingeți numele procesorului dvs. de sunet pentru a accesa mai multe caracteristici.

Notă: dacă doriți să accesați comanda rapidă **Accesibilitate** atunci când dispozitivul dvs. este blocat, porniți „**Control din ecranul de blocare**”.

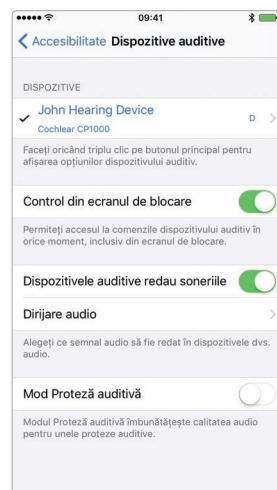

Ghid rapid pentru conectivitatea dispozitivelor Apple®

Procesor de sunet Cochlear™ Nucleus® 7



Reconectarea la un iPhone, iPad sau iPod touch

Dispozitivul Apple se va deconecta de la procesorul dvs. de sunet când opriți procesorul de sunet, când nivelul bateriei este prea scăzut sau când se află în afara razei de acțiune.

Pentru a se reconecta automat, asigurați-vă că bateria este încărcată suficient și că procesorul de sunet se află în raza de acțiune a dispozitivului, apoi porniți-l.

Conexiunea poate fi verificată accesând comanda rapidă Accesibilitate (triplu clic pe butonul Acasă) și verificând dacă procesorul de sunet a fost detectat.

Suport

Pentru mai multe informații și asistență privind funcționalitatea procesorului de sunet Nucleus 7 și Made for iPod / iPhone / iPad:

- consultați *Ghidul de utilizare pentru procesorul de sunet Nucleus 7*
- consultați *Ghidul privind punerea în pereche a procesorului de sunet Nucleus 7*
- consultați *Ghidul de utilizare a aplicației Nucleus Smart*
- contactați biroul Cochlear local
- vizitați site-ul web Cochlear: www.cochlear.com sau
- vizitați site-ul web Apple: <https://support.apple.com>

 **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
 **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus și logo-ul de formă eliptică sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cochlear Limited. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG. Apple, FaceTime, iPad, iPhone, iPod touch și Ascultare live sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.