

Cochlear™

คู่มือฉบับย่อสำหรับ
Nucleus® CR230
Remote Assistant
สำหรับ CP802

- ✓ การเริ่มต้นใช้งาน
- ✓ การอ้างอิงด่วน



Hear now. And always



เกี่ยวกับ

ใช้ Cochlear™ Nucleus® CR230

Remote Assistant เพื่อควบคุมและตรวจสอบ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™

Nucleus® CP802 ของคุณ หากคุณเป็น

ผู้สวมใส่อุปกรณ์สองข้าง รีโมตตัวช่วย

สามารถควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณ

ทั้งสองเครื่องได้

หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำเตือนใน

คู่มือผู้ใช้ CR230 Remote Assistant สำหรับ CP802



CR230 Remote Assistant

ปุ่มโปรแกรม

ปุ่มเทเลคอยล์

ปุ่มโปรแกรม

ปุ่มขึ้น/ลง
(ปรับการตั้งค่า)

ปุ่ม OK
(เลือก)

คู่มือฉบับย่อ



ปุ่มโปรแกรม

ตัวเลื่อน
ล็อค-ปลดล็อค

ปุ่มโปรแกรม

ปุ่มหน้าแรก


ปุ่มซ้าย/ขวา
(นำทาง)

ช่อง
เสียบสาย USB



เกี่ยวกับ

นำทาง

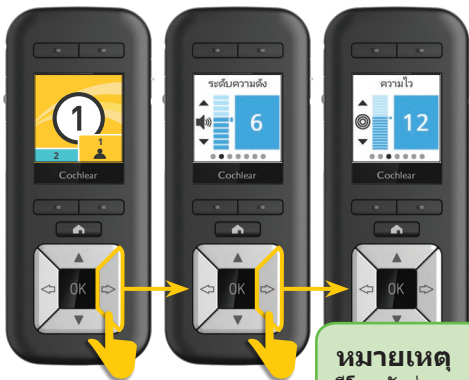

ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา
เพื่อเลื่อนไปมา
ระหว่างหน้าจอต่างๆ

หมายเหตุ
รีโมทตัวช่วยของคุณ
อาจแสดงหน้าจอที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธี
การตั้งค่า

หน้าแรก



ใช้ปุ่มหน้าแรกเพื่อกลับไปยัง
หน้าจอแรก



เก็บเงิน

ตรวจสอบสถานะ

เคล็ดลับ

ใช้มิเตอร์เสียงเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องแปลงสัญญาณหรืออุปกรณ์เสริมทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่



มิเตอร์เสียงจะแสดงเสียงที่เครื่องแปลงสัญญาณ "ได้ยิน"

ระดับแบตเตอรี่เครื่องแปลงสัญญาณ
สีเขียวหมายความว่าทุกอย่างกำลังทำงาน

กดปุ่ม OK จากหน้าจอแรก เพื่อแสดงสถานะของเครื่องแปลงสัญญาณ

ปลุก

รีโมตตัวช่วย
ของคุณจะ
“เข้าสู่โหมดพัก
เครื่อง” เมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน
กดปุ่มใดก็ได้
เพื่อ “ปลุก”
อีกครั้ง



ชาร์จแบตเตอรี่

มีสามตัวเลือกสำหรับการชาร์จ ได้แก่:

A ใช้เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่
Cochlear™
Nucleus® และชุด
ชาร์จแบตเตอรี่
Cochlear™
Nucleus®

หรือ **B** ใช้ชุดอุปกรณ์
ชาร์จ Cochlear™
Nucleus®
ซีรีส์ CR200



หรือ **C** ใช้ช่องเสียบ USB บน
คอมพิวเตอร์



คู่มือฉบับย่อ



พลังงาน

เปิด



กดปุ่ม OK
ค้างไว้เพื่อเปิด

ปิด



กดปุ่ม OK
ค้างไว้

เลือกปิด



การเปิด

คู่มือฉบับย่อ

ล็อกและปลดล็อก



ตัวเลื่อนล็อก-ปลดล็อก

เลื่อนขึ้นเพื่อ
ปลดล็อก เลื่อน
ลงเพื่อล็อก

เคล็ดลับ

ใช้ตัวเลื่อนล็อก-ปลดล็อก
เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่
ของรีโมตตัวช่วยของคุณ





เปลี่ยนโปรแกรม

แพทย์ของคุณสามารถกำหนดโปรแกรมได้สูงสุดสี่โปรแกรม ใช้ปุ่มโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนไปมาระหว่างโปรแกรม



ปรับการตั้งค่า

ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อปรับการตั้งค่า เช่น ระดับเสียง ความไวในการรับเสียง เสียงท่มและเสียงแหลม (ตามที่แพทย์ของคุณตั้งค่าไว้)



เคล็ดลับ

ปรับระดับเสียง (หรือความไวในการรับเสียงหากตั้งค่าไว้) โดยตรงจากหน้าจอแรกโดยการกดปุ่มขึ้นหรือลง



สายส่งสัญญาณเสียงแบบ ปลั๊กอิน

หากคุณเชื่อมต่อสายส่งสัญญาณเสียงแบบปลั๊กอิน
เข้ากับเครื่องแปลงสัญญาณ อุปกรณ์นั้นจะส่งเสียงไป
ยังเครื่องแปลงสัญญาณของคุณทันที

คุณยังสามารถใช้รีโมตคอนโทรลเพื่อปิดและเปิด
อุปกรณ์เสริมได้อีกด้วย

1



1x
เปิด



เปิด


กดปุ่มเทเลคอยล์สั้นๆ
หนึ่งครั้งเพื่อเปิด
สายส่งสัญญาณเสียง
แบบปลั๊กอิน



การใช้งาน

2

การใช้งาน

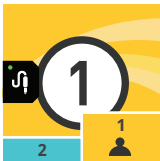

สายส่งสัญญาณเสียงแบบ
ปลั๊กอินเปิดอยู่

สายส่งสัญญาณเสียงแบบปลั๊กอิน
กำลังสตรีมเสียงไปยังเครื่องแปลง
สัญญาณของคุณ

3



1x
ปิด



ปิด

กดปุ่มเทเลคอยล์สั้นๆ
หนึ่งครั้งเพื่อปิด
สายส่งสัญญาณเสียง
แบบปลั๊กอิน



การใช้งาน

เทเลคอยล์

ฟังเสียงจากโทรศัพท์ด้วยเทเลคอยล์
แพทย์สามารถตั้งค่าเครื่องแปลง
สัญญาณของคุณด้วยเทเลคอยล์
แบบแมนวลและเทเลคอยล์อัตโนมัติ
(หากมี) เทเลคอยล์อัตโนมัติจะ
ตรวจหาสัญญาณเทเลคอยล์โดย
อัตโนมัติทุกครั้งที่คุณใช้โทรศัพท์ที่
ใช้ร่วมกับเทเลคอยล์ได้

1



1x
เทเลคอยล์

2x
เทเลคอยล์
อัตโนมัติ



เปิด

เทเลคอยล์

กดปุ่มเทเลคอยล์สั้นๆ
หนึ่งครั้งเพื่อเปิด
เทเลคอยล์

เทเลคอยล์อัตโนมัติ

กดปุ่มเทเลคอยล์สั้นๆ
สองครั้งเพื่อเปิด
เทเลคอยล์อัตโนมัติ



การใช้งาน



เทเลคอยล์เปิดอยู่

เทเลคอยล์ในเครื่องแปลงสัญญาณ
ของคุณทำงานอยู่



เทเลคอยล์อัตโนมัติเปิดอยู่ (กำลังรับ)

เทเลคอยล์อัตโนมัติเปิดอยู่และเครื่อง
แปลงสัญญาณของคุณตรวจพบและอยู่
ในระยะของระบบนำเสียงหรือโทรศัพท์



เทเลคอยล์อัตโนมัติเปิดอยู่ (สแตนด์บาย)

เทเลคอยล์อัตโนมัติเปิดอยู่แต่เครื่อง
แปลงสัญญาณของคุณไม่อยู่ในระยะ
และไม่พบระบบนำเสียงหรือโทรศัพท์

3



1x
ปิด



ปิด

กดปุ่มเทเลคอยล์สั้นๆ
หนึ่งครั้งเพื่อปิด
เทเลคอยล์หรือ
เทเลคอยล์อัตโนมัติ



การใช้งาน

โหมดขั้นสูง

รีโมตตัวช่วยของคุณถูกตั้งค่าเป็น
โหมดเบื้องต้นตามค่าเริ่มต้น
หากจำเป็น คุณสามารถสลับไปยัง
โหมดขั้นสูงเพื่อปรับการตั้งค่าบน
เครื่องแปลงสัญญาณและรีโมตตัว
ช่วยของคุณ

วิธีการเข้าสู่โหมดขั้นสูง:



กดปุ่ม OK
ค้างไว้

เมื่อเมนูปรากฏ
ขึ้น ให้กดลูกศร
ลงเพื่อเลือก
โหมดยืดหยุ่น

กดปุ่ม OK



การใช้งาน

ปรับการตั้งค่าขั้นสูง

หากจำเป็น คุณสามารถใช้โหมดขั้นสูง
เพื่อปรับการตั้งค่าขั้นสูง ในการรีเซ็ต
การตั้งค่า โปรดดู รีเซ็ตเครื่องแปลง
สัญญาณ ในหน้า 30

วิธีการปรับการตั้งค่าขั้นสูง:

หมายเหตุ

เมื่อปรับการตั้งค่า ให้กดปุ่มหน้าแรก
สองครั้งหากคุณต้องการกลับไปยัง
หน้าจอแรก





ใช้ปุ่มลูกศรขวา
เพื่อไปยังหน้า
จอค่าปรับตั้ง

กดปุ่ม OK เพื่อ
เข้าสู่การตั้งค่า
ขั้นสูง

ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น
และลงเพื่อปรับ
การตั้งค่า



การใช้งาน

จับคู่

การจับคู่ช่วยให้อุปกรณ์สองเครื่องสื่อสารกันได้ โดยปกติแล้วแพทย์ของคุณจะจับคูรีโมตตัวช่วยก่อนการใช้งานครั้งแรก แต่อาจมีบางครั้งที่คุณต้องจับคู่ด้วยตนเอง (เช่น หากคุณได้รับรีโมตตัวช่วยสำรอง)

หากรีโมตตัวช่วยของคุณแสดงหน้าจอโปรเซสเซอร์ไม่ถูกต้อง:



หมายเหตุ

หากคุณเป็นผู้ใช้อุปกรณ์สองข้าง คุณจะต้องทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเครื่องที่สองของคุณ



1



วางคอยล์ที่ด้านหลังของ
รีโมตตัวช่วย ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าเครื่องแปลง
สัญญาณของคุณเปิดอยู่

2



กดปุ่ม OK



การแก้ไขปัญหานี้

รีเซ็ตเครื่องแปลงสัญญาณ

หากจำเป็น คุณสามารถใช้รีโมตตัว
ช่วยเพื่อรีเซ็ตเครื่องแปลงสัญญาณ
ของคุณให้กลับไปใช้การตั้งค่าของ
แพทย์ของคุณได้

วิธีการรีเซ็ตการตั้งค่าเครื่องแปลง
สัญญาณ:



กดปุ่ม OK
ค้างไว้

เมื่อเมนูปรากฏ
ขึ้น ให้กดลูกศร
ลงเพื่อเลือก
ตั้งค่าใหม่

กดปุ่ม OK



การแก้ไขเมนู



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และโลโก้วงรี

เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2018

Hear now. And always

D1899118 V1

Thai translation of D1485311 V1 2018-10