

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso[®]

คู่มือฉบับย่อ

- ✓ การเริ่มต้นใช้งาน
- ✓ การอ้างอิงด่วน



CP950

Hear now. And always



เกี่ยวกับ


เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™ Kanso®
ของคุณ (หมายเลขรุ่น: CP950) ทำงานร่วมกับ
ประสาทหูเทียม Cochlear เพื่อถ่ายทอดเสียง
ไปยังหูของคุณ



หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเตือนในคู่มือผู้ใช้เครื่องแปลง
สัญญาณเสียง *Kanso*

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง

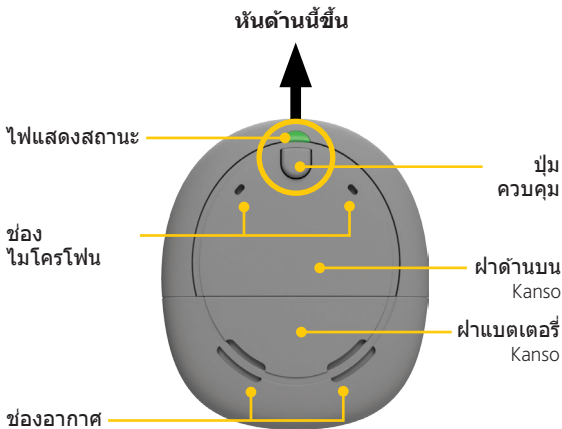

ล็อคและปลดล็อคฝาแบตเตอรี่

ในการล็อค ให้หมุนสกรูตาม
เข็มนาฬิกาจนอยู่ในแนวนอน



ล็อค




ในการปลดล็อค
ให้หมุน
ทวนเข็มนาฬิกา
จนอยู่ในแนวตั้ง




ปลดล็อค


เปลี่ยนแบตเตอรี่

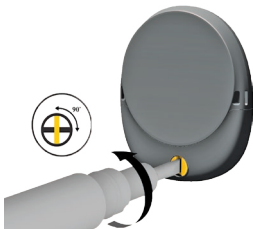

1. หมุนสกรูล็อค
ในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
ปลดล็อคฝาแบตเตอรี่
(หมุนตามเข็มนาฬิกา
เพื่อล็อค)

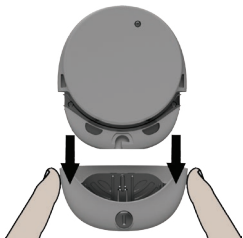

2. เลื่อนเพื่อเปิด
ใช้นิ้วมือจับที่ด้านข้าง
เพื่อดึงฝาออก

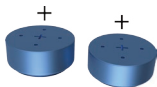

3. ใส่แบตเตอรี่กำลังสูง
แบบใช้แล้วทิ้งแบบ
Zinc-Air p675 ใหม่
2 ก้อนโดยหงาย
ด้านเรียบขึ้น




4. ใส่ฝาแบตเตอรี่กลับ
เข้าที่
หมุนสกรูล็อคตาม
เข็มนาฬิกาเพื่อล็อค

ติดตั้งเครื่องแปลงสัญญาณของคุณ

ปุ่ม/ไฟหน้าชั้น

ช่องใส่
แบตเตอรี่
คว่ำลง

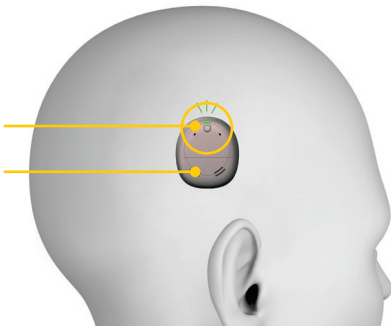

ข้อควรระวัง

- จัดวางตำแหน่งเครื่องแปลงสัญญาณเสียงให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและไม่ทำให้อุปกรณ์หลุดจากประสาทหูเทียมของคุณ
- หากคุณมีประสาทหูเทียมสองข้าง คุณต้องใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ถูกต้องสำหรับประสาทหูเทียมแต่ละข้าง


ติดแผ่นรอง SoftWear

หากคุณรู้สึกไม่สบาย ให้ติดแผ่นรอง Cochlear SoftWear™ ที่ด้านหลังของเครื่องแปลงสัญญาณ



ยึดเครื่องแปลงสัญญาณ ให้แน่นหนา

คุณสามารถติด Nucleus® Safety Line เพื่อลด
ความเสี่ยงที่เครื่องแปลงสัญญาณของคุณจะ
สูญหาย

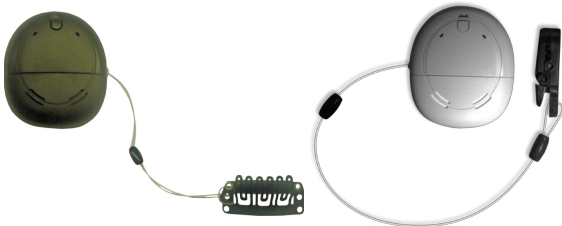


บีบห่วงแล้วสอดผ่านรูยึดจากด้านหน้าไป
ด้านหลัง สอดคลิปผ่านห่วงแล้วดึงให้แน่น

เปิดและปิด

กดปุ่มเพื่อเปิด

ในการปิด ให้กดปุ่ม
ค้างไว้จนกว่าไฟ
จะเป็นสีส้มหนึ่ง

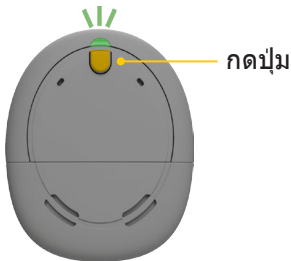


หมายเหตุ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่บน
ประสาทหูเทียมเป็นเวลาสองนาทีก

เปลี่ยนโปรแกรม

กดปุ่มเพื่อ
เปลี่ยนโปรแกรม

จำนวนของเสียงบีบ
หรือไฟกะพริบ**สีเขียว**
(หากตั้งค่าโดยแพทย์)
แสดงถึงหมายเลขของ
โปรแกรม

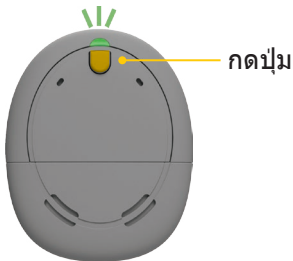


สดริ่มเสียง

กดปุ่มค้างไว้ (2 วินาที) เพื่อ
สดริ่มเสียงจากแหล่งเสียง

กดแล้วปล่อยอีกครั้งเพื่อ
สลับไปยังแหล่งเสียงถัดไป

สีน้ำเงิน: กำลังสดริ่มเสียง

แตะปุ่มเพื่อหยุดการสดริ่ม

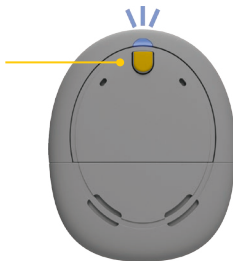

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มเครื่องแปลงสัญญาณเสียง คุณจะสลับไปยังแหล่งเสียงที่มีอยู่ตามลำดับดังนี้:

การกด	เปิดใช้งานเทเลคอยล์	ไม่มีเทเลคอยล์
1	เทเลคอยล์	อุปกรณ์เสริมไร้สาย 1
2	อุปกรณ์เสริมไร้สาย 1	อุปกรณ์เสริมไร้สาย 2
3	อุปกรณ์เสริมไร้สาย 2	อุปกรณ์เสริมไร้สาย 3
4...	เทเลคอยล์...	อุปกรณ์เสริมไร้สาย 1...

ไฟ

การใช้งานประจำวัน

ไฟ	ความหมาย
	เครื่องแปลงสัญญาณจะกะพริบขณะรับเสียงจากไมโครโฟน (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังเปิดและกำลังเปลี่ยนโปรแกรมจำนวนของการกะพริบแสดงถึงหมายเลขของโปรแกรมปัจจุบัน
	เครื่องแปลงสัญญาณจะกะพริบขณะรับเสียงจากแหล่งเสียง (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังปิดเครื่องแปลงสัญญาณ

การแจ้งเตือน

ไฟ	ความหมาย
● ● ● ...	เครื่องแปลงสัญญาณไม่ได้อยู่บนศีรษะของคุณ (หรือเชื่อมต่อกับประสาทหูเทียมที่ไม่ถูกต้อง)
● ● ● ● ●	แบตเตอรี่เครื่องแปลงสัญญาณต่ำ เปลี่ยนแบตเตอรี่
●●●●●●●●	ผิดปกติ ติดต่อแพทย์ของคุณ ไฟจะติดจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352



Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และโลโก้วรี

เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2017

D1893173 V1

Thai translation of 552818 V2 2017-06