





Funktioner hos TV-streamer

- Njut av strömat ljud med hög kvalitet direkt till CP900-seriens ljudprocessorer från tv, stereo, dator eller annan liknande enhet.
- Stöd för både analog och digital insignal.
- Återansluts automatiskt om du lämnar rummet och kommer tillbaka inom fem minuter.
- Bara installera och sedan behöver du inte göra mer – bara klicka på en knapp för att titta på tv.

TV-streamer ansluts till ett vanligt vägguttag och direkt till din ljudenhet. TV-streamer strömmar stereoljud till ljudprocessorerna från upp till sju meters håll.

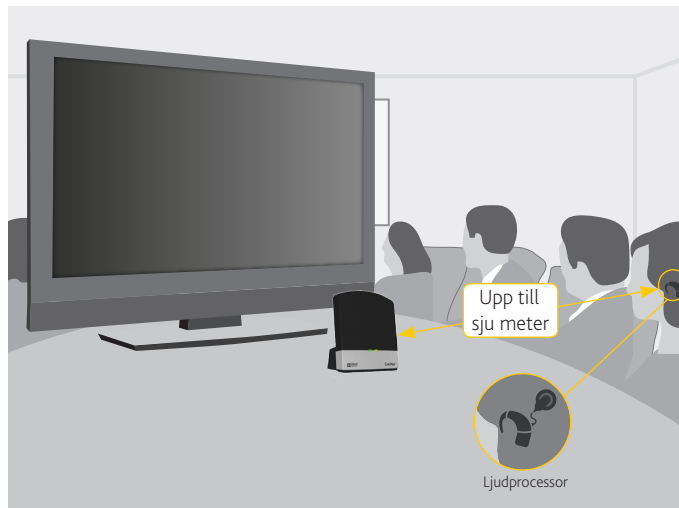

Produktöversikt

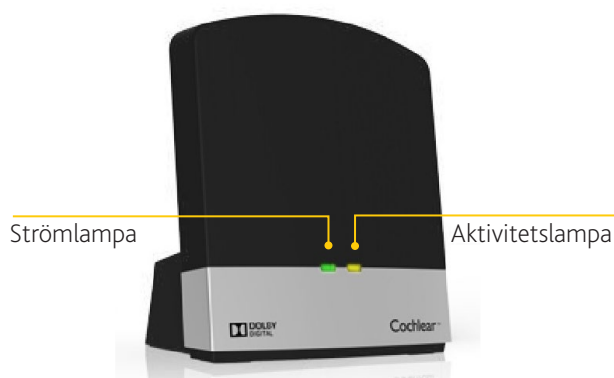

Komma igång

Justera volymen

Så här gör du:

Om du vill ändra volym använder du volymkontrollen på TV-streamer. Kontrollera att ljudprocessorerna är bekvämt justerade innan du ändrar inställningarna med volymkontrollen. I de flesta fall behöver du bara utföra den här justeringen en gång, eftersom den senast inställda volymnivån sparas i TV-streamer.

Kontroll för mono/stereo

Så här gör du:


Reglaget för mono/stereo har två lägen och kan användas för att ställa in strömningen på mono- respektive stereoljud. För användning bilateralt bör reglaget vara inställt på stereoläget. För användning unilateralt bör det vara inställt på monoläget.

Parning med ljudprocessor i CP900-serien

- A** Anslut TV-streamer med strömkabeln till vägguttaget och mikro-USB-uttaget på TV Streamer.




- B** Anslut ljudkabelns ena ände till miniuttaget för ljudsignaler på TV-streamer och den andra änden till ljudkällan.

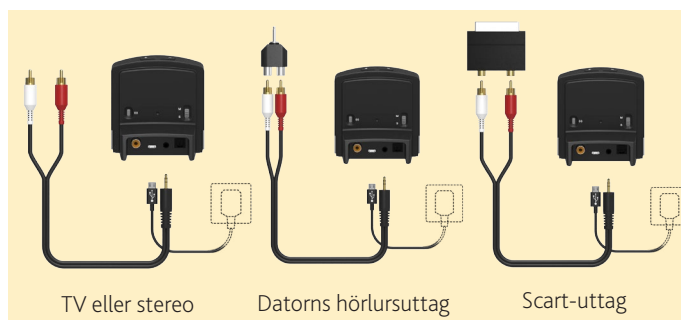


- C** Stäng av CP900-ljudprocessorn.



- D** Tryck på parningsknappen på TV Streamer en gång.

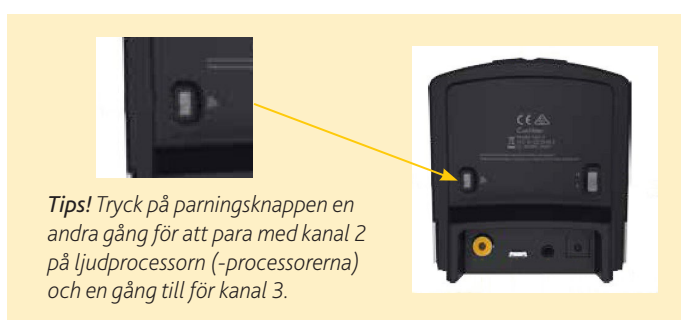

- E** TV-streamer är i parningsläge.

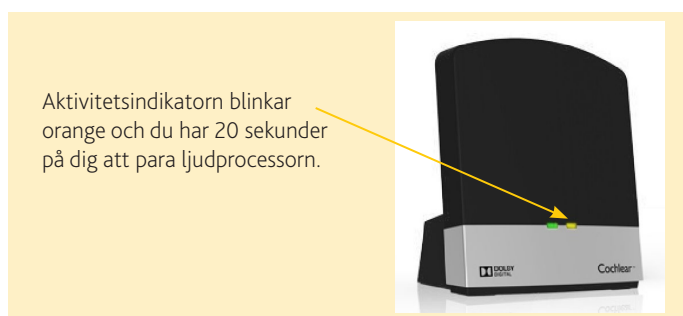

- F** När parningsläget är aktivt sätter du igång ljudprocessorn.




Support

Mer information om TV-streamer finns i den bruksanvisning som medföljer TV-streamer, samt i bruksanvisningen för trådlösa tillbehör. Mer information om Cochlears ljudprocessorer i CP900-serien finns i tillhörande bruksanvisning. Ytterligare support och videor finns på Cochlears webbplats: www.cochlear.com

Använda TV-streamer

Starta strömning med ljudprocessorn

A Sätt igång ljudprocessorn och TV-streamer.

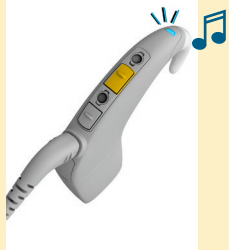

Tryck länge på ljudprocessorns övre knapp en gång.
Ljudprocessorn blinkar med blått ljus för att indikera att ljudet strömmas.

B Om du vill välja en annan kanal eller stoppa strömningen:



Tryck länge på den övre knappen en andra gång för att välja kanal 2, och en gång till för kanal 3.

Om du vill avbryta strömning trycker du kort på den övre knappen.

Starta strömning med CR230-Remote Assistant

Metod 1: Sätt igång ljudprocessorn och TV-streamer. Sätt igång CR230-Remote Assistant.



Lång tryckning på telespoleknappen.


Tips! Tryck länge på knappen en andra gång för att välja kanal 2, och en gång till för kanal 3.

Om ljudenheten är igång börjar ljudet strömma genom TV-streamer.

Om du vill avbryta strömning trycker du kort på telespoleknappen.

ELLER

Metod 2: Sätt igång ljudprocessorn och TV-streamer. Sätt igång CR230-Remote Assistant.

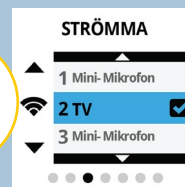

Gå till startläget och tryck på högerpilknappen för att komma till skärmen Stream.

Bläddra nedåt i listan till den kanal som du vill använda och tryck på **OK**.

Om ljudenheten är igång börjar ljudet strömma genom TV-streamer.

Om du vill avbryta strömning väljer du **Av** på urvalsskärmen för strömning.


Starta strömningen med hjälp av CR210-fjärrkontrollen

A Sätt igång ljudprocessorn och TV-streamer. Sätt igång CR210-fjärrkontrollen.



Lång tryckning på telespoleknappen.
Om ljudenheten är igång börjar ljudet strömma genom TV-streamer.

B Om du vill välja en annan kanal eller stoppa strömningen:

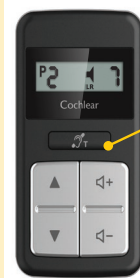

Tryck länge på telespoleknappen en andra gång för att välja kanal 2, och en gång till för kanal 3.

Om du vill avbryta strömning trycker du kort på telespoleknappen.

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus med kinesiska tecken, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, den ellipsformade logotypen och Whisper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix och WindShield är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Bone Anchored Solutions AB.
© Cochlear Limited 2015