

Apple® cihaz bağlantısı için hızlı kılavuz

Cochlear™ Nucleus® 7 Ses İşlemcisi



Not: Bu talimatlar iOS10 içindir. iOS'un sonraki sürümlerinde ekranlar biraz farklı olabilir.

Made for iPhone bağlantısının faydaları

- **Müzik ya da diğer sesleri** doğrudan ses işlemcinize yayınlayın
- **Telefon ya da FaceTime®** aramalarını doğrudan ses işlemcinize yayınlayın
- Ses işlemcinizin **ayarlarını kontrol edip düzenleyin**
- **Nucleus Smart Uygulamasını** kullanın (iPhone ve iPod touch cihazları için tasarlanmıştır).



Desteklenen donanım

Cochlear Nucleus 7 Ses İşlemcileri, şu Apple cihazlarına (veya üzeri modellere) doğrudan bağlantıyı destekler:

- **iPhone 5**
- **iPad 4. nesil; iPad Air ve iPad Air 2; iPad mini 2, 3 ve 4; iPad Pro**
- **iPod touch 6. nesil**

iOS 10 veya üzeri işletim sistemi kullanan.



Ses işlemcinizi Apple cihazınızla eşleştirme

Ses akışı veya temel kontrol özelliklerini kullanmadan önce ses işlemcilerinizi Apple cihazınızla eşleştirmeniz gerekir.

Talimatlar için bkz. *Nucleus 7 Ses İşlemcisi Eşleştirme Kılavuzu*.

Uyumlu işitme yardımcılarıyla çift modlu kullanım*

Bir tarafınızda ses işlemcisi, diğer tarafınızdaysa uyumlu bir işitme yardımcısı* kullanıyorsanız ikisini de Apple cihazınızla eşleştirebilirsiniz. Böylece cihazın ses akışı ve temel kontrol özelliklerini hem ses işlemcinizle hem de işitme yardımcınızla kullanabilirsiniz.

Önemli: Öncelikle klinik uzmanınızın, ses işlemcinizin programlama yazılımıyla ses işlemcinizi ve işitme yardımcınızı birbirine bağlaması gerekir.

Not: Apple cihazınızla eşleştirme yaparken ses işlemcinizi ve işitme yardımcınızı aynı eşleştirme penceresinde eşleştirdiğinizden emin olun.

Birden fazla iPhone, iPad veya iPod touch ile eşleştirme

Ses işlemcilerinize en fazla beş farklı cihaz eşleştirebilirsiniz ancak aynı anda yalnızca birine etkin olarak bağlı olabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazlar arasında **manuel olarak** değiştirmek için bağlı cihazın Bluetooth® bağlantısını kapatın ve bağlanmak istediğiniz cihazın Bluetooth bağlantısını açın. Ses işlemciniz otomatik olarak ikinci cihaza bağlanacaktır.

* Ayrıntılı bilgi için bkz. www.cochlear.com/nucleus/compatibility.

Apple® cihaz bağlantısı için hızlı kılavuz

Cochlear™ Nucleus® 7 Ses İşlemcisi



Müzik veya video akışı



Müzik ya da diğer sesleri doğrudan bağlı ses işlemcilerine yayınlayabilirsiniz.

Ses işlemciniz bağlandığında, varsayılan ses akışı hedefi olacaktır.

"Oynat" ögesine bastığınızda ses, ses işlemcinize yayınlanmaya başlanacaktır.

Gerekirse ekranın alt tarafından yukarı kaydırarak Kontrol Paneline gidin ve ses kartına erişmek için sola kaydırın. Ekranın alt tarafındaki açılır menüden ses işlemcinizi seçin.

Kontrol Panelindeki kayar düğmeyi veya Apple cihazınızdaki ses seviyesi düğmelerini kullanarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

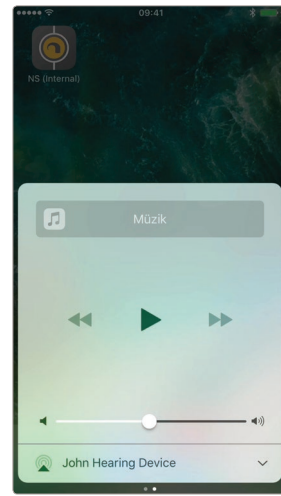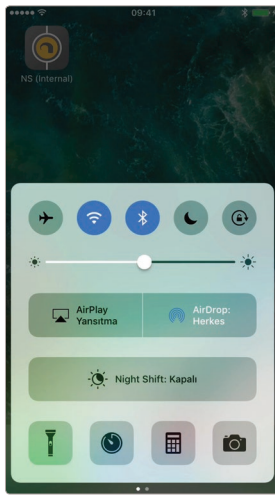



Telefon ya da FaceTime aramaları akışı

Telefon ya da FaceTime aramalarını doğrudan bağlı ses işlemcilerine yayınlayabilirsiniz.

Ses işlemciniz bağlandığında, varsayılan ses akışı hedefi olacaktır.

Telefonla bir arama yaptığınızda otomatik olarak açılan bir menü, sesin nereye yayınlanacağını seçmenizi sağlar.

Bir telefon araması aldığınızda (ya da telefon konuşması sırasında) ekrandaki "ses" simgesine basarak sesin nereye yayınlanacağını seçebilirsiniz.

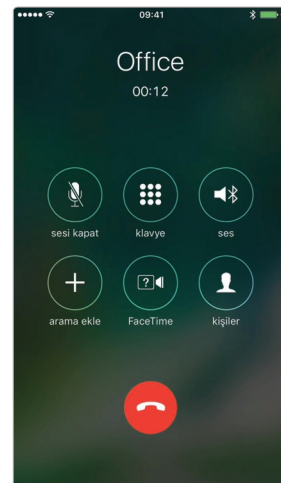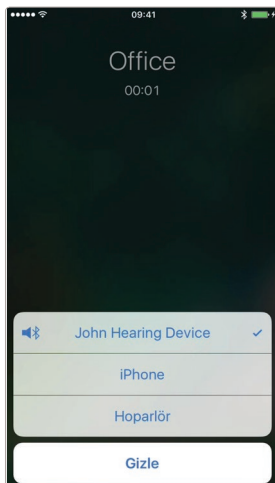

Apple® cihaz bağlantısı için hızlı kılavuz

Cochlear™ Nucleus® 7 Ses İşlemcisi





Varsayılan ses akışı ayarlarını değiştirme

Seslerin her zaman ses işlemcisine yayınlanmasını istemeyebilirsiniz. Örneğin, kontrol ve takip amacıyla çocuğunuzun ses işlemcisini iPhone'unuzla eşleştirdiyse ancak çocuğunuzun telefon konuşmalarını duymasını istemiyorsanız.

Çalma sesinin telefon hoparlöründen verilmesi için **Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > İşitme Aygıtları** ögesine gidin ve **"İşitme Aygıtları Zil Seslerini Çalar"** özelliğini kapatın.

Ardından **Ses Yönlendirme > Arama Sesi** ögesine dokunun ve **"Asla İşitme Cihazı"** ögesini seçin. Müzik veya diğer seslerin akışını devre dışı bırakmak için **Ortam Sesi**, nde de aynı işlemi tekrar edin.

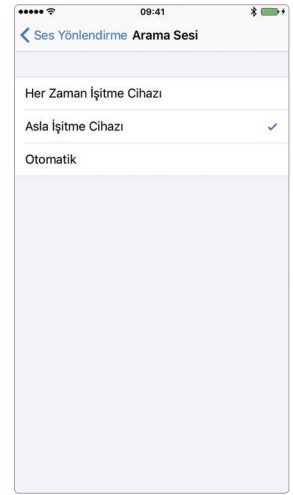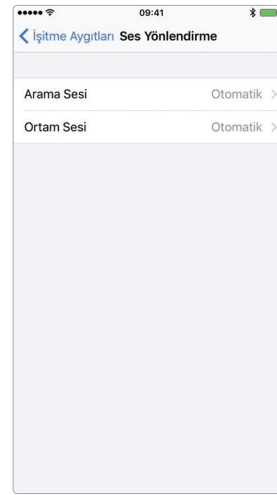

Ses işlemcisini iPhone, iPad veya iPod touch ile kontrol etme


Erişilebilirlik kısayolu veya **Ayarlar** üzerinden Ses işlemcinizin temel işlevlerini Apple cihazınızla kontrol edebilirsiniz.

Erişilebilirlik kısayolu üzerinden kontrol

Ana ekran tuşuna üç kez basarak dahili kontrollere erişebilirsiniz.

İşitme Aygıtları ekranında önemli bilgileri görebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ve program seçebilirsiniz.


Canlı Dinleme, Apple cihazınızın mikrofونunun sesleri algılayarak bu seslerin doğrudan ses işlemcinize yayınlanmasını sağlar.

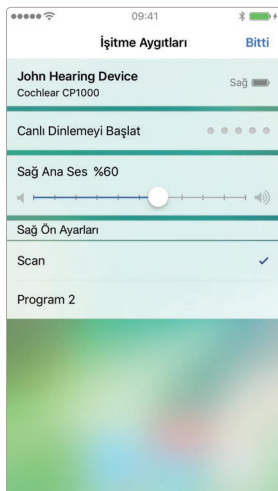

Ayarlar üzerinden kontrol

Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > İşitme Aygıtları yolundan ses işlemcisine erişin. Daha fazla özelliğe erişmek için ses işlemcinizin adına dokunun.

Not: Cihazınız kilitliken **Erişilebilirlik Kısayoluna** erişmek istiyorsanız **"Kilitli Ekranda Denetim"** özelliğini açın.

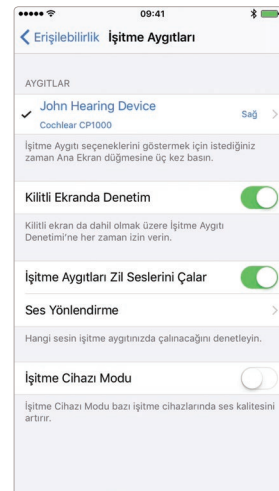

Apple® cihaz bağlantısı için hızlı kılavuz

Cochlear™ Nucleus® 7 Ses İşlemcisi



iPhone, iPad veya iPod touch'a yeniden bağlanma

Ses işlemcinizi kapattığınızda, pil seviyesi çok düşükse veya cihaz aralık dışındaysa Apple cihazının ses işlemcinizle olan bağlantısı kesilecektir. Otomatik olarak yeniden bağlanmak için pilin yeterince dolu olduğundan ve ses işlemcisinin cihaz aralığının içinde olduğundan emin olun ve işlemciyi açın.

Erişilebilirlik kısayoluna erişerek (ana ekran tuşuna üç kez basarak) ve ses işlemcisinin algılanıp algılanmadığını kontrol ederek bağlantıyı doğrulayabilirsiniz.

Destek

Nucleus 7 Ses İşlemcisi ve Made for iPod / iPhone / iPad işleviyle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için lütfen:

- bkz. *Nucleus 7 Ses İşlemcisi Kullanıcı Kılavuzu*
- bkz. *Nucleus 7 Ses İşlemcisi Eşleştirme Kılavuzu*
- bkz. *Nucleus Smart Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu*
- yerel Cochlear ofisiyle iletişime geçin
- Cochlear web sitesini ziyaret edin: www.cochlear.com veya
- Apple web sitesini ziyaret edin: <https://support.apple.com>

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 11 542 7770
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus ve elips şeklindeki logo Cochlear Limited şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, Bluetooth SIG şirketinin tescilli ticari markasıdır. Apple, FaceTime, iPad, iPhone, iPod touch ve Canlı Dinleme; Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.