

เครื่องแปลง สัญญาณเสียง Nucleus[®] 7

คู่มือฉบับย่อ

- ✓ การเริ่มต้น
ใช้งาน
- ✓ การอ้างอิง
ด่วน

CPI000



Hear now. And always



เกี่ยวกับ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™
Nucleus® 7 ของคุณ (หมายเลขรุ่น: CP1000)
ทำงานร่วมกับประสาทหูเทียมของคุณ
เพื่อถ่ายทอดเสียงไปยังหูของคุณ



หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำเตือนในคู่มือผู้ใช้เครื่องแปลง
สัญญาณเสียง Nucleus 7

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง





ล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่

ล็อคแบตเตอรี่เข้ากับหน่วยประเมินผลเพื่อป้องกันการรบกวน



ดันไปด้านซ้าย
เพื่อล็อค/
ดันไปด้านขวา
เพื่อปลดล็อค

ถอด/ใส่แบตเตอรี่



ถอด





ใส่

เครื่องแปลงสัญญาณ
จะเปิดโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ ใช้แล้วทิ้ง




1. หมุนสกรูล็อคใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อปลดล็อค
ฝาแบตเตอรี่ที่ป้องกัน
การจัดแอะ (หมุนตาม
เข็มนาฬิกาเพื่อล็อค)
2. เลื่อนเพื่อเปิด

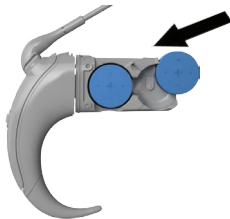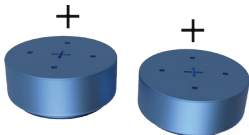


3. ใส่แบตเตอรี่แบบใช้แล้ว
ทั้งแบบ Zinc-Air 675
(PR44) ใหม่ 2 ก้อน
(ห้ามใช้แบบซิลเวอร์
ออกไซด์หรืออัลคาไลน์)
โดยหงายด้านเรียบขึ้น
4. ใส่ฝาแบตเตอรี่กลับ
เข้าที่
5. เครื่องแปลง
สัญญาณจะเปิด
โดยอัตโนมัติ

สวมเครื่องแปลงสัญญาณ

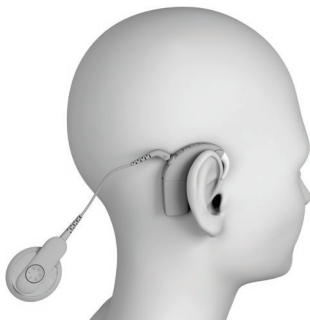

1. วางเครื่องแปลงสัญญาณไว้ที่หูของคุณโดยปล่อยให้คอยล์ห้อยลง

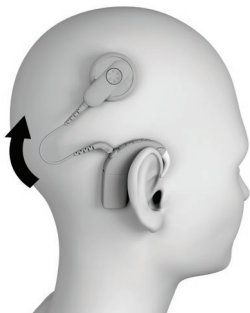

2. ขยับคอยล์ไปทางด้านข้างและวางลงบนประสาทหูเทียมของคุณ



ข้อควรระวัง

หากคุณมีประสาทหูเทียมสองข้าง คุณต้องใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ถูกต้องสำหรับประสาทหูเทียมแต่ละข้าง

เปิดและปิด

วิธีการเปิด:

- เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือ
- กดปุ่มแล้วปล่อย

วิธีการปิด:

- ถอดแบตเตอรี่ออกหรือ
- กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่าจะปิด



หมายเหตุ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถอดออกจากประสาทหูเทียมเป็นเวลาสองนาที (หากตั้งค่าโดยแพทย์ของคุณ)

เปลี่ยนโปรแกรม

กดปุ่มแล้วปล่อยเพื่อ
เปลี่ยนโปรแกรม

จำนวนของเสียงบีบหรือ
ไฟกะพริบ **สีเขียว**
(หากตั้งค่าโดยแพทย์)
แสดงถึงหมายเลขของ
โปรแกรม



สตริมเสียง

กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที
แล้วปล่อยเพื่อสตริมเสียง

สีน้ำเงิน: กำลังสตริมเสียง
จากเทเลคอยล์/
อุปกรณ์เสริมไร้สาย
สีเขียว: กำลังรับเสียงจาก
ไมโครโฟน



กดแล้วปล่อยอีกครั้งหากคุณ
ต้องการสลับไปยังแหล่งเสียง
ถัดไป

กดครั้งแรก	เทเลคอยล์ (หากตั้งค่าไว้)
กดครั้งที่สอง	อุปกรณ์เสริมไร้สายที่จับคู่ เครื่องแรก
กดครั้งที่สาม...	อุปกรณ์เสริมไร้สายที่จับคู่ เครื่องถัดไป...

กดปุ่มแล้วปล่อยเพื่อหยุดการ
สตรีมและสลับไปยังการตั้งค่า
ก่อนหน้า

ไฟ

การใช้งานประจำวัน

ไฟ	ความหมาย
	เครื่องแปลงสัญญาณจะกะพริบขณะรับเสียงจากไมโครโฟน (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังเปิดและกำลังเปลี่ยนโปรแกรมจำนวนของการกะพริบแสดงถึงหมายเลขของโปรแกรมปัจจุบัน
	เครื่องแปลงสัญญาณจะกะพริบขณะรับเสียงจากแหล่งเสียง (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังปิดเครื่องแปลงสัญญาณ

การแจ้งเตือน

ไฟ	ความหมาย
● ● ● ...	เครื่องแปลงสัญญาณจะกะพริบในขณะที่คอยล์ไม่อยู่บนประสาทหูเทียม (หรือเชื่อมต่อกับประสาทหูเทียมที่ไม่ถูกต้อง)
● ● ● ● ●	แบตเตอรี่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่
●●●●●●●●	ผิดปกติ ติดต่อแพทย์ของคุณ ไฟจะติดจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และโลโก้วงรี

เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2017

D1876292 V1

Thai translation of 592756 V2 2017-04