

Kanso[®] 2 サウンドプロセッサ

クイックガイド



- ☑ はじめに
- ☑ クイックリファレンス

CPII50

Hear now. And always



概要

Cochlear™ Kanso® 2 (コクレア® カンソ 2) サウンドプロセッサ (モデル番号: CP1150) は、コクレア人工内耳インプラントと連携して耳に音を伝えます。

詳細情報と警告については、『Kanso 2 サウンドプロセッサ取扱説明書』を参照してください。

サウンドプロセッサ

こちらが上です



マイクロホン
ポート

LED インジ
ケータ
(表示ランプ)

コクレアの
ロゴ

カバー

裏面



サウンドプロセッサは次の方法で操作できます。

- Nucleus® Smart (ニュークレアススマート) アプリを使用します。
- 前面をタップします (6 ページを参照)。
- コクレア CR310 リモートコントロールを使用します。

アプリまたはリモートコントロールの使用方法については、それぞれの取扱説明書を参照してください。

サウンドプロセッサの充電

サウンドプロセッサの内蔵電池は、次の方法で充電できます。

- 自宅用充電器に一晩入れて充電します。または
- 携帯用充電器 (オプションのアクセサリ) に接続して、外出先で充電します。

詳細情報および警告については、『コクレア充電器取扱説明書』を参照してください。



携帯用充電器



自宅用充電器

タップ

操作	タップ回数
電源を入れる	ダブルタップ-2回タップ
電源を切る	トリプルタップ-3回タップ

- ・ コクレアのロゴをタップします。
- ・ すばやくしっかりとタップします。押さないようにしてください。



ヒント

サウンドプロセッサは、インプラント上に装着されているか否かにかかわらず、タップすることが可能です。



電源を入れる / 切る

電源を入れる : ダブルタップ (2 回タップ)。

サウンドプロセッサの電源が入ると、LED インジケータが**緑色に点滅**します。

電源を切る : トリプルタップ (3 回タップ)。

サウンドプロセッサの電源が切れるとき、LED インジケータが**オレンジ色の点灯**に変わります。



アドバイス

サウンドプロセッサをインプラント位置に装着すると電源が自動的に入り、インプラント位置から外してから 2 分間経過すると電源が自動的に切れます (担当の医師または医療従事者が有効にした場合)。

プログラムの変更

プログラムを切り替えるには、アプリまたはリモートコントロールを使用します。

詳しくは、アプリまたはリモートコントロールの取扱説明書を参照してください。

プログラムが変更されると、LED インジケータが緑色に点滅します。

緑色の点滅またはアラーム音の回数は、選択したプログラムを示します。

音声のストリーミング

オーディオ機器を切り替えるには、アプリまたはリモートコントロールを使用します。

詳しくは、アプリまたはリモートコントロールの取扱説明書を参照してください。

オーディオ機器が変わると、LED インジケータが青色に点滅します。



サウンドプロセッサの装用

以下の状態で、サウンドプロセッサをインプラント位置に装着します。

- ・ コクレアのロゴ、ランプおよびマイクロホンポートが上に来るようにします。
- ・ 端が直線になっている箇所が下に来るようにします。



- ・ 最適な聴こえを得るため、かつ、インプラント位置からの落下を防ぐために、サウンドプロセッサを正しい位置で装着することが重要です。
- ・ インプラントを両側に装用している場合は、左右のインプラントとサウンドプロセッサを正しい組み合わせで使用してください。




ソフトパッド (SoftWear パッド) の取り付け

不快感が生じた場合は、コクレアソフトパッド (SoftWear™ パッド) をサウンドプロセッサの裏面に貼って使用します。



サウンドプロセッサの 落下防止

サウンドプロセッサの紛失を防ぐために、Kanso 2 安全紐を取り付けることができます。

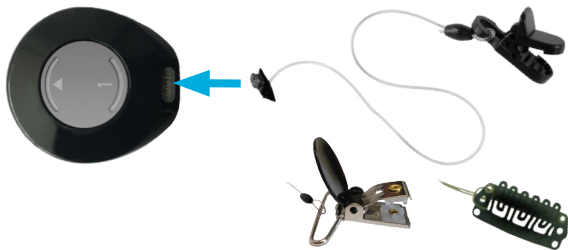

安全紐のコネクタをサウンドプロセッサの接続部に押し込みます。クリップを衣服に取り付けます (またはヘアクリップを頭髮に付けます)。

LED インジケータ

日常の使用時

LED インジケータ	意味
	マイクロホンからの音声を受信している間、サウンドプロセッサのLEDインジケータが点滅します(小児モードのみ)。
	サウンドプロセッサを起動しています。または、プログラムを変更しています。点滅回数は現在のプログラム番号を示します。
	外部音源からの音声を受信している間、サウンドプロセッサのLEDインジケータが点滅します(小児モードのみ)。
	サウンドプロセッサの電源を切っています。

警告

LED インジケータ	意味
	サウンドプロセッサが頭部から外れています (または誤ったインプラントに装着しています)。
	サウンドプロセッサの電池残量が少なくなりました。サウンドプロセッサを充電してください。
	エラーです。担当の医師または医療従事者にご連絡ください。問題が解決するまで点灯したままになります。

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne

Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Americas

10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

www.cochlear.com

販売名 : Kanso 2 サウンドプロセッサ

承認番号 : 30300BZX00273000

Cochlear、Hear now. And always、Nucleus および楕円形のロゴは、Cochlear Limited の商標または登録商標です。

© Cochlear Limited 2021

D1738426 V1

Japanese translation of D1898007 V1 2021-08