

# Nucleus<sup>®</sup> 7 サウンドプロセッサ

クイックガイド

- ✓ はじめに
- ✓ クイック  
リファレンス

CPI000



Hear now. And always



# 概要

Cochlear™ (コクレア®) Nucleus® 7 サウンドプロセッサ (モデル番号: CP1000) は、コクレア人工内耳インプラントと連携して耳に音を伝えます。



## アドバイス

詳細情報と警告については、『*Nucleus 7* サウンドプロセッサ取扱説明書』を参照してください。

# サウンドプロセッサ





## 電池パックのロック/ ロック解除

電池パックが簡単に外れないように、電池パックをプロセッシングユニットにロックします。



左に押すとロック/  
右に押すと解除

# 電池パックの取り外し/ 取り付け



取り外し





取り付け

自動的にサウンドプロ  
セッサの電源が入ります。

# 使い捨て電池の交換




1. 保護ロックのネジを反時計回りに回して保護ロック付き電池カバーのロックを解除します (時計回りに回すとロックされます)。
2. スライドして開きます。

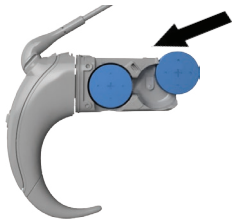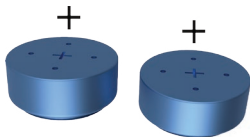


3. 2 個の新しい使い捨て 675 (PR44) 空気亜鉛電池 (酸化銀電池またはアルカリ電池は不可) を、平らな面を上にして挿入します。
4. 電池カバーを取り付けます。
5. 自動的にサウンドプロセッサの電源が入ります。

# サウンドプロセッサの装用

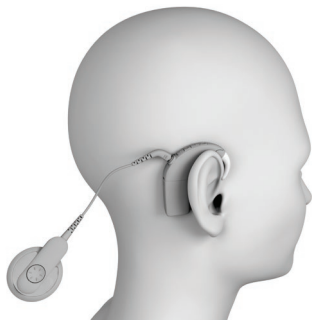

1. サウンドプロセッサを耳に掛け、送信コイルをぶら下げた状態にします。



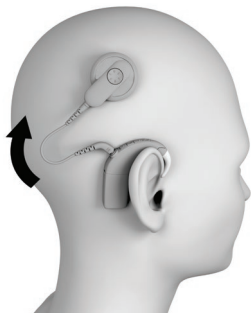

2. 送信コイルを横に  
向けたまま動かして、インプラントの  
位置に当てます。



### 注意

インプラントを両側に装用している場合は、左右のインプラントとサウンドプロセッサを正しい組み合わせで使用してください。

# 電源を入れる/切る

電源を入れるには:

- 電池パックを取り付けます。または、
- コントロールボタンを**短く押します**。

電源を切るには:

- 電池パックを取り外します。または、
- コントロールボタンを5秒間**長押しします**。



## アドバイス

送信コイルを頭から外してから2分経過したときにも、サウンドプロセッサの電源は自動的に切れます (担当の医師または医療従事者がそのように設定した場合)。

# プログラムの変更

コントロールボタンを  
**短く押す**と、プログラム  
が切り替わります。

アラーム音または**緑色**  
の点滅の回数 (担当の  
医師または医療従事  
者が設定した場合)  
はプログラム番号を  
示します。



# 音声のストリーミング

コントロールボタンを2秒間**長押し**してから**放す**と、音声のストリーミングが開始します。

**青色:** テレコイル/ワイヤレスアクセサリから音声をストリーミングしています。

**緑色:** マイクホンから音声を受信しています。



別の音源に切り替える場合は、**もう一度押して放します。**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 1 回目の押下    | テレコイル (設定されている場合)      |
| 2 回目の押下    | 最初にペア設定されたワイヤレスアクセサリ   |
| 3 回目の押下... | 次にペア設定されたワイヤレスアクセサリ... |

コントロールボタンを**短く押す**と、ストリーミングが停止して前の設定に戻ります。

# LED インジケータ

## 日常の使用時

| LED インジケータ                                                                        | 意味                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | マイクロホンからの音声を受信している間、サウンドプロセッサの LED インジケータが点滅します (小児モードのみ)。 |
|  | サウンドプロセッサを起動しています。または、プログラムを変更しています。点滅回数は現在のプログラム番号を示します。  |
|  | 外部音源からの音声を受信している間、サウンドプロセッサの LED インジケータが点滅します (小児モードのみ)。   |
|  | サウンドプロセッサの電源を切っています。                                       |

## 警告

| LED インジケータ                                                                        | 意味                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 送信コイルが頭から外れると (または誤ったインプラントに装着されると)、サウンドプロセッサの LED インジケータが点滅します。 |
|  | サウンドプロセッサが電池切れです。電池を交換してください。                                    |
|  | エラーです。担当の医師または医療従事者にご連絡ください。問題が解決するまで点灯したままになります。                |

*Hear now. And always*



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

販売名: Nucleus 7 サウンドプロセッサ

承認番号: 23000BZX00310000

本取扱説明書には医療機器に該当しない製品も含まれます。

Cochlear、「Hear now. And always」、Nucleus、および楕円形のロゴは、

Cochlear Limited の商標または登録商標です。

© Cochlear Limited 2017

D817614 ISS2

Japanese translation of 592756 ISS2 APR17