

Guide de jumelage Cochlear™ (pour Android™)



Ce guide vous indique comment jumeler votre processeur Cochlear™ Nucleus® 8, Nucleus 7, Nucleus 7 SE, Nucleus 7 S ou Kanso® 2* avec l'application Nucleus Smart sur un smartphone Android compatible†, pour que vous puissiez utiliser l'application pour contrôler et surveiller votre(vos) processeur(s).

Remarque

- Pour utiliser la version Android de l'application, votre processeur doit être doté du dernier micrologiciel. Consultez votre régleur.
- Certains écrans affichent votre nom et votre modèle de processeur. Les images présentées dans ce guide sont uniquement des exemples d'écrans ; elles peuvent différer de ce que vous voyez dans votre application. Suivez les instructions de ce guide tout en vous reportant aux écrans correspondants de l'application pour vous guider dans sa prise en main.

* Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.

† Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez le site www.cochlear.com/compatibility.


Jumelage de votre/vos processeur(s)

Remarque


- Si vous disposez d'autres processeurs déjà jumelés, vous devez tout d'abord les déconnecter. Consultez la page 4 pour connaître les instructions de déconnexion.
- Interférences radio : lorsque vous tentez de jumeler ou de connecter votre processeur avec l'application, il est possible que certains appareils produisent des interférences (par ex., des fours micro-ondes, des routeurs sans fil ou des émetteurs audio TV). Si cela se produit, éloignez-vous de l'appareil concerné et réessayez.

- 1 Préparez votre/vos processeur(s).
- 2 Activez le Bluetooth sur votre smartphone Android.
- 3 Lancez l'application Nucleus Smart.
- 4 Faites glisser votre doigt sur les écrans de bienvenue.
- 5 Créez votre compte Cochlear ou connectez-vous si vous possédez un compte.


- 6 L'écran **Pair your processor(s)** (Jumeler votre/vos processeur(s)) s'affiche. Appuyez brièvement sur **Continue** (Continuer).

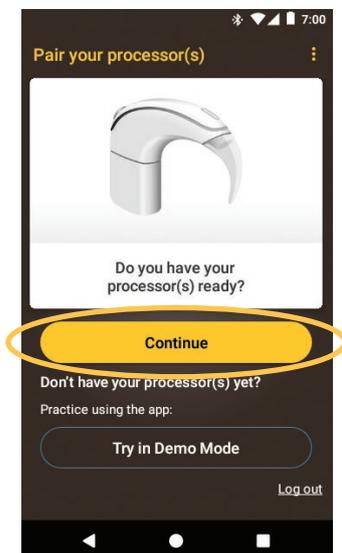

- 7 Lorsque la fenêtre contextuelle **Location** (Localisation) s'affiche, appuyez brièvement sur **OK**.

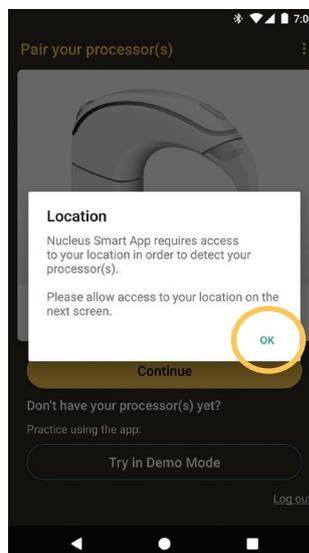

- 8 Lorsque la fenêtre contextuelle **Allow Nucleus Smart** (Autoriser Nucleus Smart) s'affiche, appuyez brièvement sur **ALLOW** (AUTORISER).

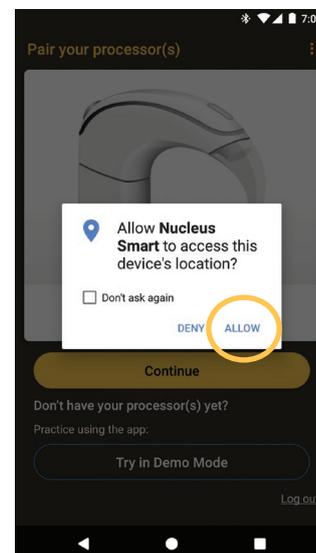


...SUITE À LA PAGE SUIVANTE...


- 9 L'écran **Detect your processor(s)** (Détection votre/vos processeur(s)) s'affiche.
Désactivez puis **Activez** votre/vos processeur(s). Si vous disposez de deux processeurs, effectuez cette opération pour chacun d'eux, l'un après l'autre. Après avoir désactivé et réactivé votre(vos) processeur(s), appuyez sur **Continue** (Continuer).




- 10 Lorsque votre ou vos processeurs s'affichent, **appuyez brièvement** une fois dessus pour démarrer le jumelage.

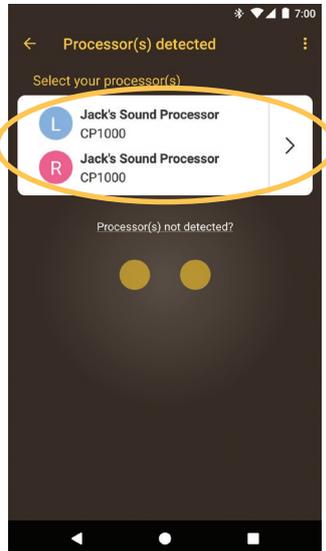


- 11 L'écran **Paired processors** (Processeurs jumelés) s'affiche lorsque le jumelage est terminé.
 Appuyez brièvement sur **Continue** (Continuer).

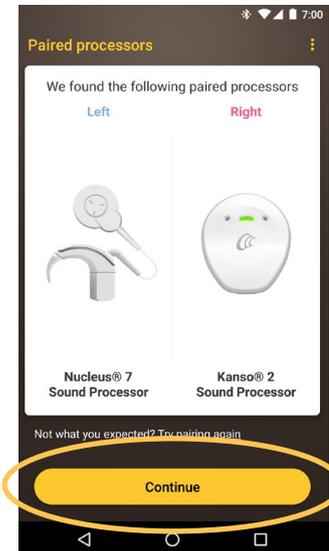

- 12 Suivez les invites à l'écran pour **Vérifier** votre(vos) processeur(s).
 L'écran de **préparation des processeurs** s'affiche pendant 60 secondes. Appuyez brièvement sur **Continue** (Continuer).

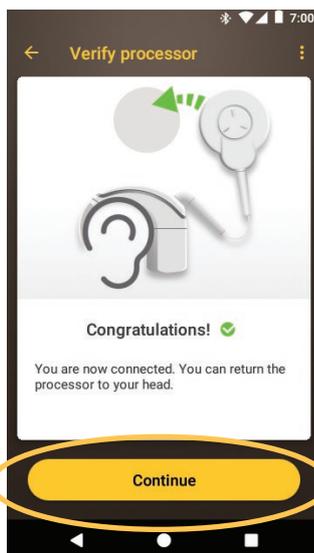

- 13 Appuyez brièvement sur une option de l'écran **Sound Processor(s)** (Processeur(s)). Si vous y êtes invité, entrez les détails de l'utilisateur.

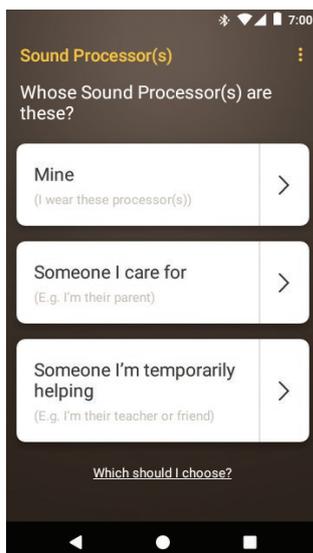

- 14 Si l'écran **Audio streaming** (Diffusion audio) s'affiche, reportez-vous aux étapes de la **page suivante**.
ou
 Si l'écran **Setup complete** (Configuration terminée) s'affiche, appuyez brièvement sur **Start using the app** (Commencer à utiliser l'application).




Remarque
 Pour jumeler d'autres appareils compatibles, vous devez d'abord désactiver le Bluetooth sur les appareils déjà jumelés.



Smartphones avec diffusion audio pour prothèses auditives

Si votre smartphone prend en charge la diffusion audio pour les prothèses auditives, vous pouvez recevoir le son de votre téléphone directement sur votre processeur.
Pour configurer la diffusion audio :

- 1 Lorsque l'écran **Audio streaming** (Diffusion audio) s'affiche, appuyez sur **Enable** (Activer). Votre/vos processeur(s) s'éteindra(ont) pendant quelques instants.
- 2 Si d'autres processeurs sont déjà jumelés ou diffusés sur votre smartphone, vous devez sélectionner l'option **Forget** (Oublier) maintenant. Suivez les invites à l'écran pour **Oublier** les processeurs, puis appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir à l'application Nucleus Smart.
- 3 Attendez que l'écran **Connecting to processors** (Connexion aux processeurs) s'affiche.

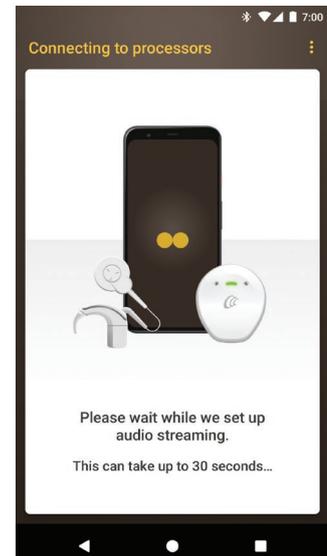

- 4 Si les **sons du système** sont activés sur votre smartphone, l'écran **System sounds** (Sons du système) s'affiche. Suivez les invites à l'écran pour **désactiver les sons du système**, puis appuyez brièvement sur le **bouton Retour** pour revenir à l'application Nucleus Smart.
- 5 Lorsque l'écran **Setup complete!** (Configuration terminée !) s'affiche, appuyez brièvement sur **Start using the app** (Commencer à utiliser l'application).
- 6 Vous pouvez maintenant utiliser **l'application Nucleus Smart** ! Pour plus d'informations, consultez le *Mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.

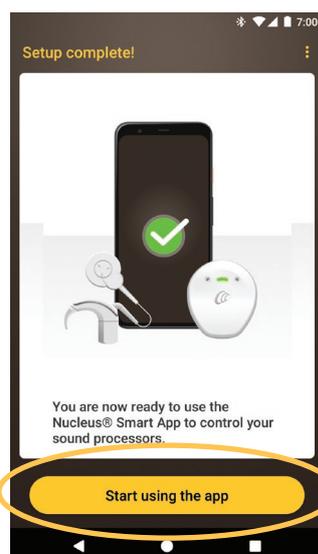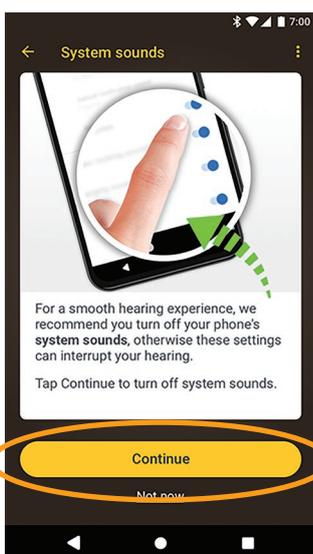

Remarque

Pour jumeler d'autres appareils compatibles, vous devez d'abord désactiver le Bluetooth sur les appareils déjà jumelés.


Déconnexion de votre/vos processeur(s)

Si vous changez de processeur(s), par exemple si vous recevez un nouveau processeur suite à une réparation, vous devez :


- **déconnecter** le ou les anciens processeurs ;
- puis, **jumeler** le ou les nouveaux processeurs.

Pour déconnecter votre/vos processeur(s) :


1 Ouvrez le **menu** de l'application.

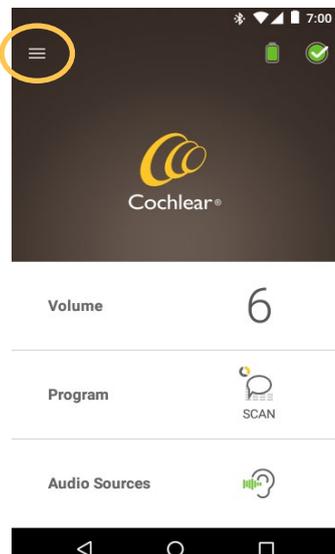


2 Appuyez brièvement sur **Settings** (Paramètres).

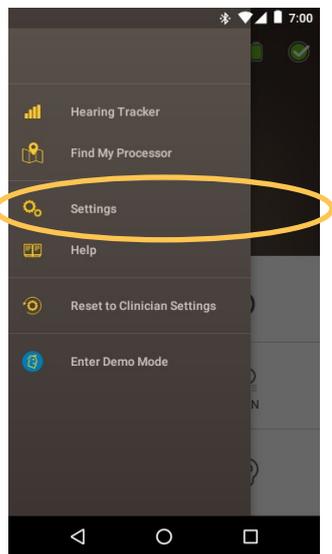


3 Appuyez brièvement sur **Processor settings** (Paramètres du processeur).

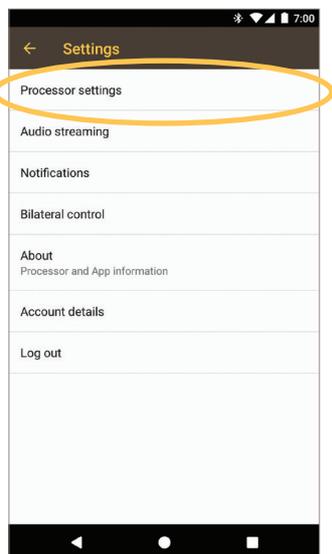


4 Appuyez brièvement sur **Unpair your processor(s)** (Déconnexion des processeurs).

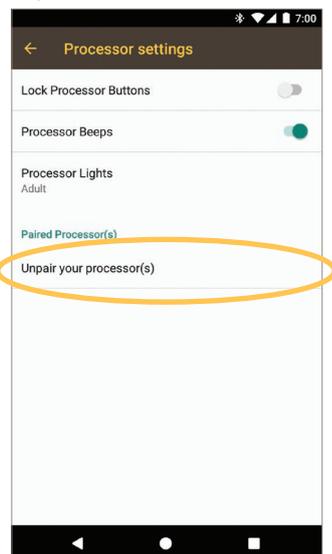


5 Appuyez brièvement sur **YES** (OUI).

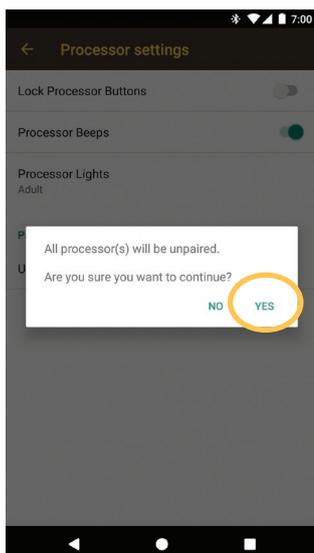

6 Si la diffusion est activée pour votre/vos processeur(s), un message s'affiche et vous invite à **désactiver la diffusion audio**.

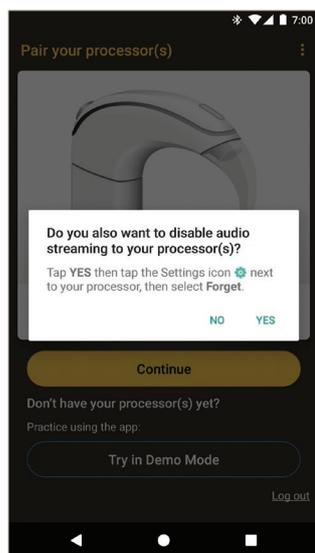


- A. Appuyez brièvement sur **YES** (OUI) et suivez les invites pour **oublier** votre/vos processeur(s).
- B. Appuyez brièvement sur le **bouton Retour** pour revenir à l'application Nucleus Smart.

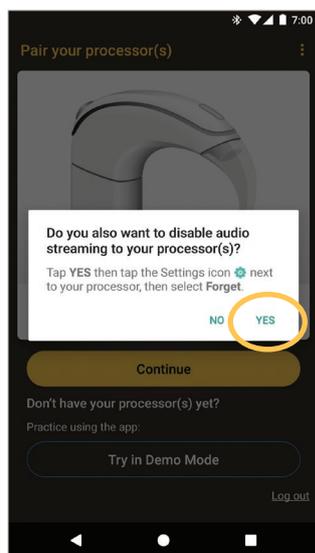


Vérification de l'état de la diffusion audio

Pour vérifier l'état de votre diffusion audio :


- 1 Ouvrez le **menu** de l'application.

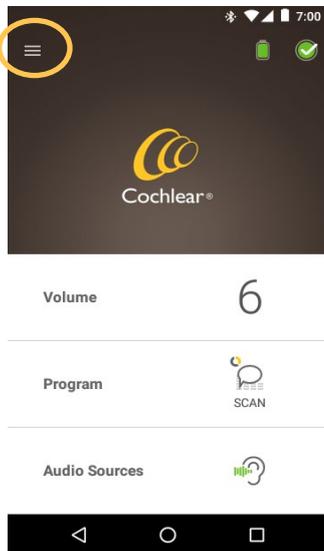

- 2 Appuyez brièvement sur **Settings** (Paramètres).

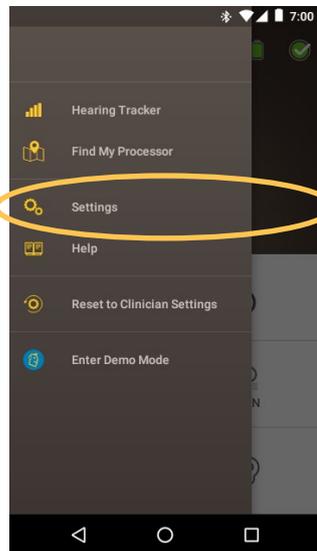

- 3 Appuyez brièvement sur **Audio streaming** (Diffusion audio).

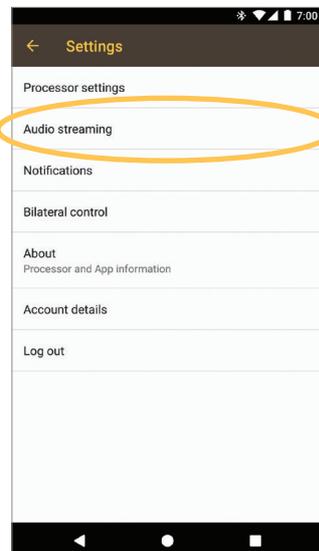


- 4 Si la diffusion audio n'est **pas active**, lisez les informations à l'écran pour plus de détails et appuyez brièvement sur les liens disponibles.


Désactivation de la diffusion audio

Pour désactiver la diffusion audio :


- 1 Ouvrez le **menu** de l'application.

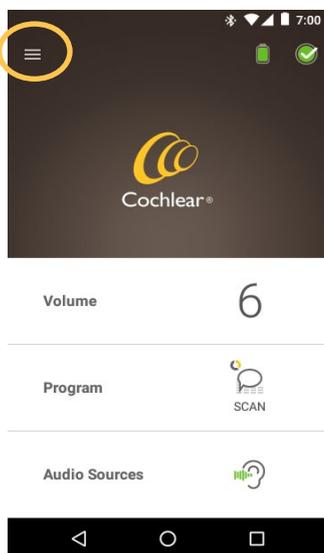


- 2 Appuyez brièvement sur **Settings** (Paramètres).

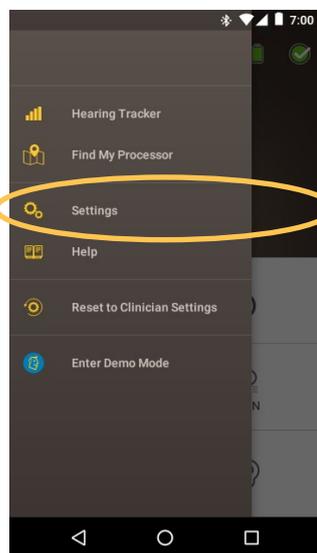

- 3 Appuyez brièvement sur **Audio streaming** (Diffusion audio).

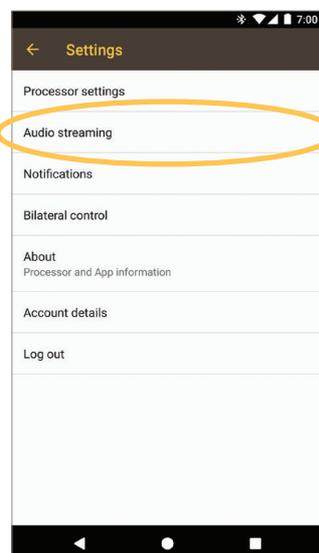

- 4 Si la diffusion audio est **activée**, suivez les instructions pour la désactiver.

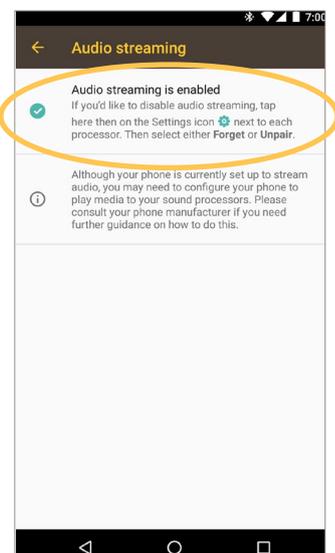

- Pour plus d'informations sur l'application, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.
- Pour plus d'informations sur le processeur, consultez le *mode d'emploi du processeur*.
- Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres informations, consultez le site : www.cochlear.com/

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Kanso, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Android est une marque de commerce de Google Inc.

P1939425-D1939509 V2
French translation of
P1868807-D1843360 V5 2022-08